


# Tilbehør

---

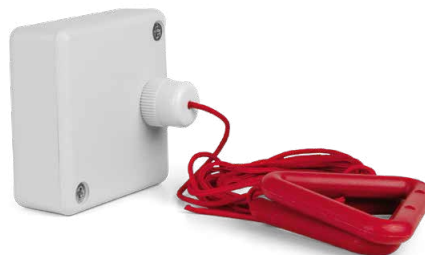

## Trekksnor

---

Den takmonterte trekksnoren er en fast og praktisk måte å tilkalle hjelp på hvis en nødssituasjon oppstår. Den kan plasseres strategisk på ulike steder i boligen, for eksempel på badet eller ved sengen. Alarmene sendes trådløst til en Careium trygghetsalarm og videresendes til alarmsentralen.



## PikoButton

---

Den eksterne knappen PikoButton er en svært holdbar kontrollbryter som er lett og behagelig å bruke for personer med funksjonsnedsettelse eller spesielle behov. En 9350 radiomodul er nødvendig for trådløs tilkobling til en Careium trygghetsalarm.



## Ping-Pong bryter

---

Ping-Pong-bryteren plasseres nær brukeren slik at brukeren enkelt kan aktivere en alarm ved å berøre den, f.eks. med hodet eller med en annen kroppsdeler. Alarmene sendes trådløst til en Careium trygghetsalarm og videresendes til alarmsentralen.



## Blåsebryter

---

Blåsebryteren plasseres nær brukeren slik at alarmen enkelt kan aktiveres ved å blåse inn i den. Alarmene sendes trådløst til en Careium trygghetsalarm og videresendes til alarmsentralen.



## Stemmeutløst alarm

Talealarmen er en sensor som reagerer på ufrivillige lyder, f.eks. under et epileptisk anfall, eller bestemte lyder, f.eks. et rop om hjelp. Sensoren plasseres nær brukeren, og følsomheten justeres slik at bare lyd fra brukeren utløser alarmen. En separat mikrofon kan kobles til for å skjerme bort støy fra miljøet (støykansellering) for å oppnå enda høyere følsomhet. Alarmene sendes trådløst til en Careium trygghetsalarm og videresendes til alarmsentralen.



## Røykvarsler i10

Optisk røykvarsler med mulighet for seriekobling og innebygd litiumbatteri med 10 års varighet. Stor testknapp som er lett å bruke. Når røykvarsleren aktiveres, avgir den et høyt og tydelig lydsignal (85 dB), aktiverer alarmlyden i alle seriekoblede detektorer og sender et anrop til overvåkingssenteret via trygghetsalarmen. Røykvarsleren kan kobles til Careiums trygghetsalarmer og trygghetstelefoner for å skape et trygt hjemmemiljø. Den kan kobles sammen med Careium CO i10, Heat i10 samt ekstra røykdetektorer i10 for maksimal sikkerhet.

Brann er en av de største farene i hjemmet. Boligbranner tar hundrevis av liv hvert år, og skader mange boliger. I boliger med røykvarsler blir brannen oppdaget raskere, og røykvarslere fører til færre dødsfall og mindre skader. Det kan være viktig at røykvarsleren er tilknyttet et alarmmottak. Dette sikrer at utrykningspersonell kan kontaktes på vegne av sårbare eldre personer som kanskje ikke hører eller kan reagere på en frittstående alarm.

## Komfyrvakt

Komfyrbranner er en vanlig årsak til boligbranner. Komfyrvakten reagerer raskere på farlige situasjoner enn andre sikkerhetsenheter, uten å utløse irriterende falske alarmer. Takket være den intelligente teknologien slår komfyrvakten av komfyren før det dannes giftige gasser eller oppstår brann, skade på eiendom eller personskaade. To ulike typer varmesensorer måler makstemperatur, temperaturendringer og omgivelsestemperatur. Hvis en alarm utløses, kobles strømmen ut og en alarm sendes til alarmsentralen via trygghetsalarmen.

# Tilbehør



## Bevegelsessensor "Motion"

Motion 9200 er en batteridrevet bevegelsessensor med brukervennlig utforming, som enkelt kan installeres der det er behov for den. Den innebygde passive infrarøde sensoren kan brukes til å registrere både aktivitet og inaktivitet. En intern klokke gjør det mulig å styre sensoren, for eksempel slik at en alarm sendes hvis det ikke registreres noen bevegelse i løpet av et visst antall timer. Sensoren kan også stilles inn slik at den bare er aktivert om natten. Den kan legges på gulvet som sengemonitor. Den utfellbare støttebraketten kan installeres i ulike posisjoner, og gir mulighet for montering på både gulv, tak og vegg.



## Døralarm "mBox"

mBox 9200 døralarm er svært lett å installere, og er helt trådløs. En liten magnet festes på døren, og senderen festes i dørkarmen. Døralarmen varsler alarmsentralen hvis en person forlater bolig eller åpner en dør. En utkoblingsfunksjon gjør at besøkende kan komme og gå uten å aktivere alarmen, og den har også en på/av-bryter. Den fungerer også som radiomottaker og -sender i ett. En mBox signalforsterker kan brukes mellom Careium trygghetsalarm og en trådløs Telecare-sensor for å utvide sensorens rekkevidde.

mBox 9200 kan brukes som sengekontrollenhet, radiosender, signalforsterker og døralarm. Når den utløses, sendes en alarm til alarmsentralen via trygghetsalarmen.



## Epilepsialarmen "Companion mini"

Epilepsialarmen Companion mini er en trygghet for personer med tonisk klonisk anfall (grand mal). Sensoren registrerer epilepsi – anfall i seng, hvor den er plassert under madrassen. En alarm sendes automatisk til trygghetsalarmen, når det registreres et anfall. Enheten er trådløs, og tilpasses individuelt i forhold til sensitivitet og tid. Companion mini er sertifisert som medisinsk utstyr klasse 1.